

MY AIR. MY HEALTH.

MYALLERGY DETECTIVE™



ALLERGY AIR TESTING SYSTEM



TEST THE AIR IN YOUR
PROPERTY FOR THE TOP
ASTHMA AND ALLERGY
TRIGGERS INCLUDING
MOLD, POLLEN, ANIMAL
HAIR AND MORE.

INSTRUCTION GUIDE

UNIT FEATURES



Contact Us

customer@MyAllergyDetective.com | www.MyAllergyDetective.com

Thank you for purchasing MyAllergyDetective™. For best results, please read and follow instructions carefully. For the most up-to-date instructions, FAQs and videos, visit MyAllergyDetective.com

Testing Instructions Start Here: Customize your report



RECOMMENDED STEP (optional):

Take digital photos of your sampling locations in action. Upload your photos to your online report during the registration process. This will provide a more customized and documented report.

U.S. Patent | Made in China | Assembled in the U.S.A.

1-Year Manufacturer's Limited Warranty

STEP 1: TAKE AIR SAMPLES

a



Required Outdoor Air Sample:

- On one cassette, mark the box labeled "Outside Sample." (This will be your **REQUIRED** control sample.)
- Ensure you have a power outlet to plug in to. You may need an extension cord.
- Take sample when it's not raining or snowing, in an open area 10 ft. away from the structure and overhangs, 3 to 5 ft. off the ground. (i.e. Use a chair to set the pump on.)

b



- Remove both tape flaps from the top and bottom of the air cassette. (Save flaps for resealing cassettes.)
- Open the pump lid. (This will remain open during testing.)
- Insert cassette onto the air sample inlet tray and secure firmly in place.



- Push the button to start the sample, button will illuminate during testing.
- The pump will shut off automatically after the 5-minute sampling session is complete.




- Reseal top and bottom of air cassette with tape flaps after air sampling is complete.

Indoor Air Sample:

- Mark the remaining air cassette(s) with the room name. Samples should be taken in the middle of the room, 3 to 5 ft. off the ground. For additional tips on testing, visit MyAllergyDetective.com/FAQs.
- Repeat steps (b) through (d) outlined in Outdoor Air Sample section.
- Indoor sampling should be performed immediately after outdoor air sample.

Note: Do not reuse cassettes. Take indoor air samples within 15 minutes of the outdoor air sample. Outdoor sample must be repeated for all future testing sessions.

STEP 2: REGISTER ONLINE

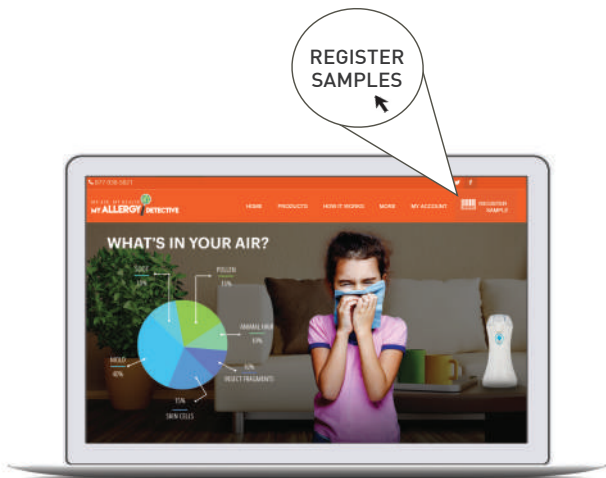

- Visit [MyAllergyDetective.com](https://www.myallergydetective.com) to register your samples
- Click the “Register Samples” button at the top of the homepage and follow the instructions.
- Create a new account or log in.
- Complete payment for the lab analysis and note your confirmation number.

STEP 3: MAIL SAMPLES

a

- FedEx Express Shipping: 1-2 days to reach the laboratory

FedEx Express Shipping is trackable and convenient. For your convenience, call 1.800.GOFEDEx to schedule a free FedEx pick up from your location, Monday through Friday. You may also dropoff at any FedEx location.

b



- Insert air samples into the FedEx mailing envelope provided and mail to laboratory.

Note: Sending more than one envelope or package may cause samples to arrive to lab separately and cause possible delays with analysis. Please consolidate all samples into one envelope.

SISTEMA DE PRUEBA DE AIRE ALERGENO



HAGA UNA PRUEBA
EN SU HOGAR PARA
LOS ALÉRGENOS
MÁS COMUNES
INCLUYENDO EL
MOHO CON
NUESTRA BOMBA
REUTILIZABLE.



CARACTERÍSTICAS DE UNIDADES



Contáctenos

customercare@myallergydetective.com | www.MyAllergyDetective.com

Gracias por comprar My Allergy Detective™.
Para lograr mejores resultados por favor leer y seguir cuidadosamente las instrucciones. Para obtener instrucciones, FAQs y videos actualizadas, visitar a MyAllergyDetective.com.

Instrucciones de prueba comienzan aquí: Personalizar su reporte



PASO RECOMENDADO (opcional):

Tome fotos digitales de su punto de muestreo en acción y subirlo a su informe digitales durante el proceso de registro para un informe más detallado.

Patente de EE.UU. | Hecho en China | Ensamblada en EE.UU.

Garantía Limitada del Fabricante de 1 año

PASO 1: TOMA MUESTRAS DEL AIRE



Muestra del Aire Exterior Obligatorio:

- Marca la caja que dice "Outside Sample" sobre el cartucho para muestras de aire. (Esto sera su muestra de control **OBLIGATORIO**.)
- Asegúrate de tener un tomacorriente para enchufar. Una extensión eléctrica puede ser necesaria.
- No tomes la muestra del aire si está lloviendo o nevando en una área abierta y despejada que esté a 10 pies de distancia de estructuras y los voladizos y 3 a 5 pies sobre el suelo. (i.e. utilizar una silla para poner la bomba en.)




- Despega las solapas desde la parte superior e inferior del cartucho. (Salvar las solapas para volver a sellar.)
- Abre la tapa de la bomba para el muestreo del aire. [La tapa permanecerá abierta mientras la bomba esté funcionando.]
- Inserta el cartucho en la bandeja de entrada de la muestra de aire, asegúralo con firmeza en su lugar.

c



- Presiona el botón para empezar la muestra de aire. El botón se encenderá durante la prueba.
- La bomba se apagará automáticamente después de 5 minutos aun cuando la prueba está completa.

d

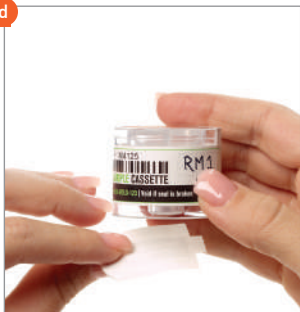



- Vuelve a sellar la cinta en la parte superior e inferior del cartucho cuando la prueba está completa.

Muestra del Aire Interior:

- Marcar el cartucho para la muestra de aire restante con el nombre del lugar de la habitación donde se tomará la muestra. La muestra en el interior debe tomarse en el medio de la habitación y de 3 a 5 pies aproximadamente del suelo.
- La muestra en el interior debe tomarse inmediato después de la muestra del aire exterior.
- Repite pasos (b) a (d) detallado en la sección **Muestra del Aire Exterior**.

Nota: Cartucho limitado a un uso. No vuelva a utilizar cartuchos. Tomar muestras de interior entre 15 minutos de la muestra exterior. Una muestra del aire exterior obligatorio por cada sesión de prueba.

PASO 2: REGISTRATE POR INTERNET

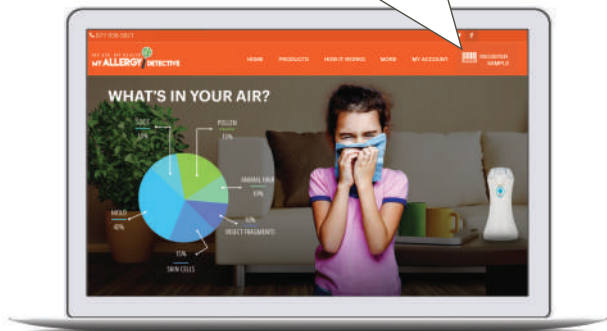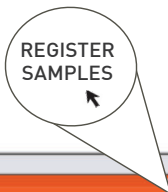

- Antes de enviar las muestras, **visitar [MyMoldDetective.com](https://www.mymolddetective.com)** para registrar sus muestras.
- Haz clic en el icono “Register Samples” en la parte superior de la página de inicio y sigue las instrucciones.
- Crear una cuenta nueva o iniciar sesión.
- Completar el pago para el análisis de laboratorio y guardar su numero de confirmacion.

PASO 3: ENVIA LAS MUESTRAS

a

- ✓ FedEx Express Shipping: 1-2 días laboral para llegar al laboratorio.

FedEx Express es rastreable y conveniente. Por su conveniencia, llame 1.800.GOFEDEx para programar una recolección gratis lunes a viernes. También se puede dejar en cualquier oficina de FedEx.

b



- Poner cartuchos de muestras en el sobre incluido y enviarlo por correo al laboratorio.

Nota: El envío de más de un sobre o paquete puede causar muestras a llegar al laboratorio separados y causar retrasos en el análisis.